

간이변기

Handy bedpan

사용설명서





- 품명 : 간이변기
- 모델명/종류 : ABP-105/간이소변기(남성용)
ABP-106/간이소변기(여성용)
- 제조년월 : 포장박스에 표기
- 제조자명 : (주)에이엠이
- 제조국명 : 한국
- A/S전화번호 : 031-677-7522
- 단체표준번호 : KSPA 3001
- 인증번호(ABP-105) : 제239호(20130521-5)
- 인증번호(ABP-106) : 제240호(20130521-6)

[품질보증] 본 제품은 단체표준인증 단체인 당 협회에서 품질을 보증함

한국고령친화용품산업협회

간이소변기(남성용) ABP-105

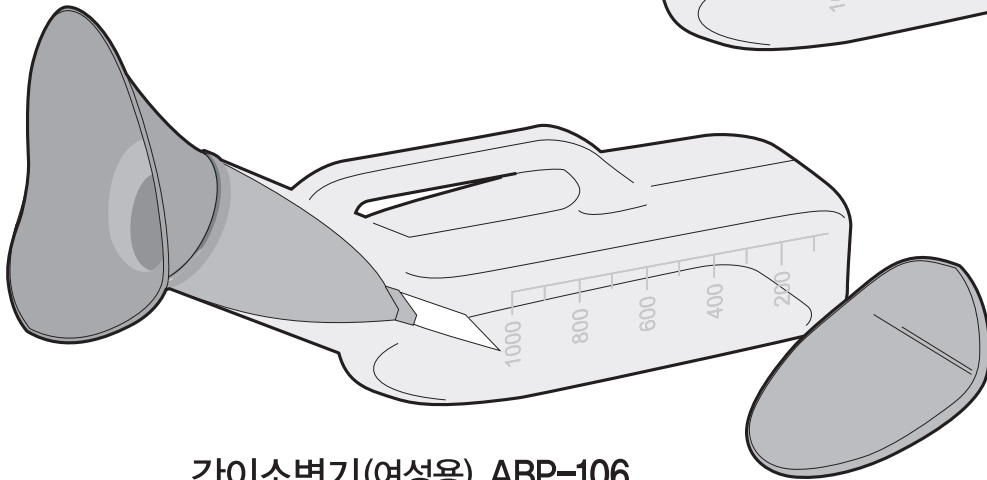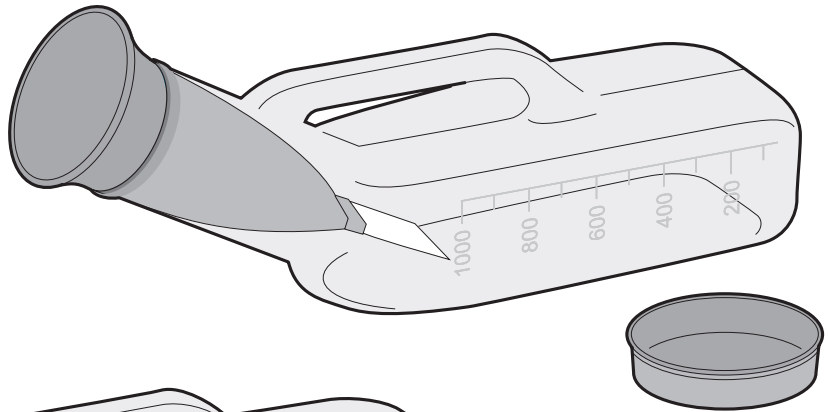

간이소변기(여성용) ABP-106

이 사용설명서를 반드시 읽은 후 사용하시고, 다 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

- 사용전에 '안전을 위한 주의사항' 을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다. 구입일, 판매점 등을 기입하고 확인 해 주십시오.

안전을 위한 주의사항

반드시 지켜 주십시오!

사용자 및 그 외의 사람에게 상해, 재산상의 피해를 사전에 방지하기 위해 안전에 관련된 중요한 사항들을 기재하고 있으니 반드시 지켜 주십시오.

*그림기호의 의미는 아래와 같습니다.



이 그림기호는 반드시 지켜야 할 강제사항을 의미합니다.



경고 표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망 및 피해가 발생할 가능성이 있는 경우



이 그림기호는 해서는 안되는 금지를 의미합니다.



주의 표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상 및 피해가 발생할 가능성이 있는 경우



주의

소변통과 반월판통이 확실하게 체결되어 있는지 확인 후 사용하십시오. 소변이 누출되어 사용자 주변이 오염될 수 있습니다.



주의


사용자의 상태에 따라 보호자가 필요 할 경우 반드시 수발자의 보호하에 사용하십시오. 예상치 않은 사용자의 상해나 제품파손 및 소변누출로 인한 사용자 주변의 오염 등이 발생할 수 있습니다.



주의

사용 후 올바른 방법으로 손질 및 보관하여 주십시오. 제품의 오염, 변형 및 변색의 원인이 됩니다.

각부의 명칭

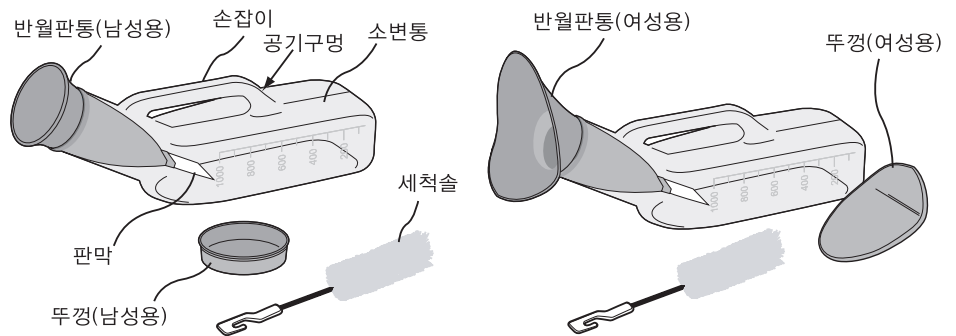



남성용 소변기 ABP-105

여성용 소변기 ABP-106

제품규격

제 품 명	간이변기	구성부품	재 질
모 델 명	ABP-105(남성용)/ABP-106(여성용)	소변통	PP
제품유형	간이소변기	반월판통	TPR
중 량	172g(남성용)/196g(여성용)	뚜 껑	TPR
용 량	1,000cc	판 막	PVC

■ 제품치수(단위: cm)

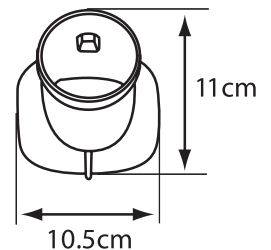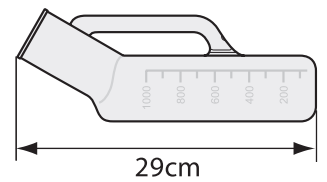


구성품


• 간이소변기 세트 1set • 세척솔 1ea • 사용설명서 1ea

사용방법


- 뚜껑을 열고 반월판통과 소변통이 확실히 닫혀있는지 확인합니다.
- 소변통이 바닥면과 수평이 되도록하여 채뇨합니다.

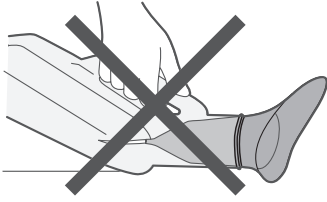


⊘ 기울여서 채뇨하지 마십시오. 소변통으로의 소변유입에 장애가 됩니다.

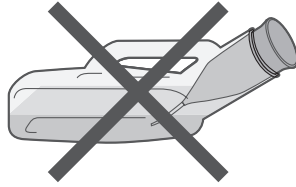


⊘ 약 700cc 이상 채뇨하지 마십시오. 소변통으로의 소변유입에 장애가 됩니다.

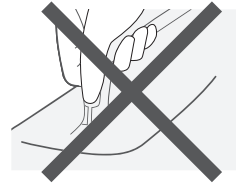

⊘ 공기구멍을 막고 채뇨하지 마십시오. 소변통으로의 소변유입에 장애가 됩니다.

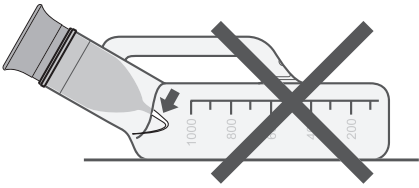

⊘ 판막이 구부러지지 않도록 하십시오. 소변통으로의 소변유입에 장애가 됩니다.

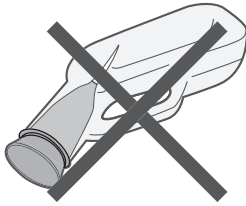


⊘ 채뇨 후 눕히거나 뒤집어 놓지 마십시오. 소변이 누출될 수 있습니다.




! 소변량을 측정 할 때에는 소변통을 세워서 측정 하십시오.

- 소변을 버릴때에는 반월판통을 돌려서 분리하고 버립니다.

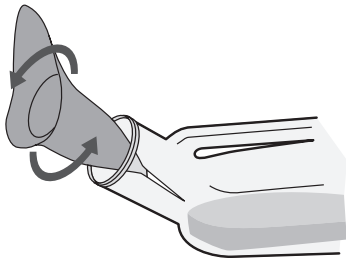


제품특징

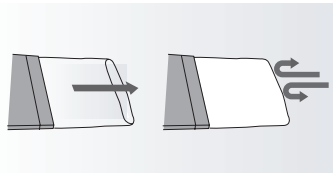

반월판통과 결합되어 있는 판막의 기능에 의하여 소변이 유입되며 소변이 떨어지는 소리를 막아줍니다. 또한 냄새의 유출도 막아주어 사용자의 쾌적한 환경에 도움을 줍니다.


손질 및 보관방법

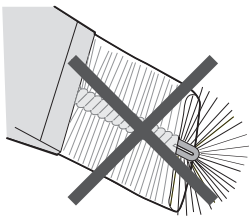

⊘ 세척솔로 판막을 세척하지 마십시오. 판막이 파손될 수 있습니다.

⊘ 판막과 결합된 반월판통은 삶지 마십시오. 판막과 반월판통의 결합이 떨어질 수 있습니다.

! 판막과 결합된 반월판통은 중성세제로 세척하거나 크레졸로 소독하십시오.

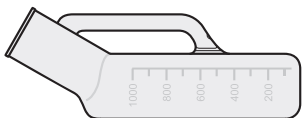

! 소변통은 끓는 물에서 열탕소독하거나 또는 크레졸 및 중성세제로 세척하십시오.

! 세척솔은 크레졸로 소독하거나 중성세제로 세척 하십시오.



! 세척 및 소독 후 잘 건조시켜서 직사광선을 피하여 보관하십시오. 직사광선에 장기간 노출 시 제품변형, 변색 및 열화의 원인이 됩니다.

교환, 반품 및 A/S

- 당사 제품의 소비자분쟁해결기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거합니다.
- 당사 제품의 보증기간은 1년입니다.

소비자 피해유형		보상 내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장으로 중요한 수리를 요하는 경우		제품교환 또는 환불	해당 없음
구입 후 30일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장으로 중요한 수리를 요하는 경우		제품교환 또는 무상수리	해당 없음
수리 가능	동일 하자로 2회째 고장 발생 시	무료수리	유료수리
	동일 하자로 3회째 고장 발생 시	교환 또는 환불	유료수리
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	교환 또는 환불	유료수리
수리 불가	부품 보유기간 이내에 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	교환 또는 환불	정액 감가상각 후 교환
	부품 보유기간 이내에 수리용 부품이 없어서 수리 불가능 시	교환 또는 환불	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환불
소비자 과실	수리가 가능한 경우	유료수리	유료수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유료수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	해당 없음
천재지변에 의한 고장이 발생 하였을 경우		유료수리	유료수리
사용상 정상마모 되는 소모성 부품을 교환하는 경우			
기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부원인으로 인한 경우			

제품보증서

제품명 : _____ 모델명 : _____
 구입일 : _____ 년 _____ 월 _____ 일
 고객명 : _____ 전화번호 : _____
 판매점 : _____ 전화번호 : _____

- 수리 의뢰시 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 규정된 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상보증기간은 구입일로부터 산정되므로 판매점 등에서 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. 구입일자 미기재 및 확인이 곤란한 경우 제조년월일로부터 3개월이 경과한 날을 기준으로 품질 보증기간을 기산합니다.
- 당사 부품 보유기간은 6년입니다.

ame

(주)에이엠이 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 469 (우)17600
 고객상담실 031-677-7522